


Septiflow

Anestesi/respiratorslang

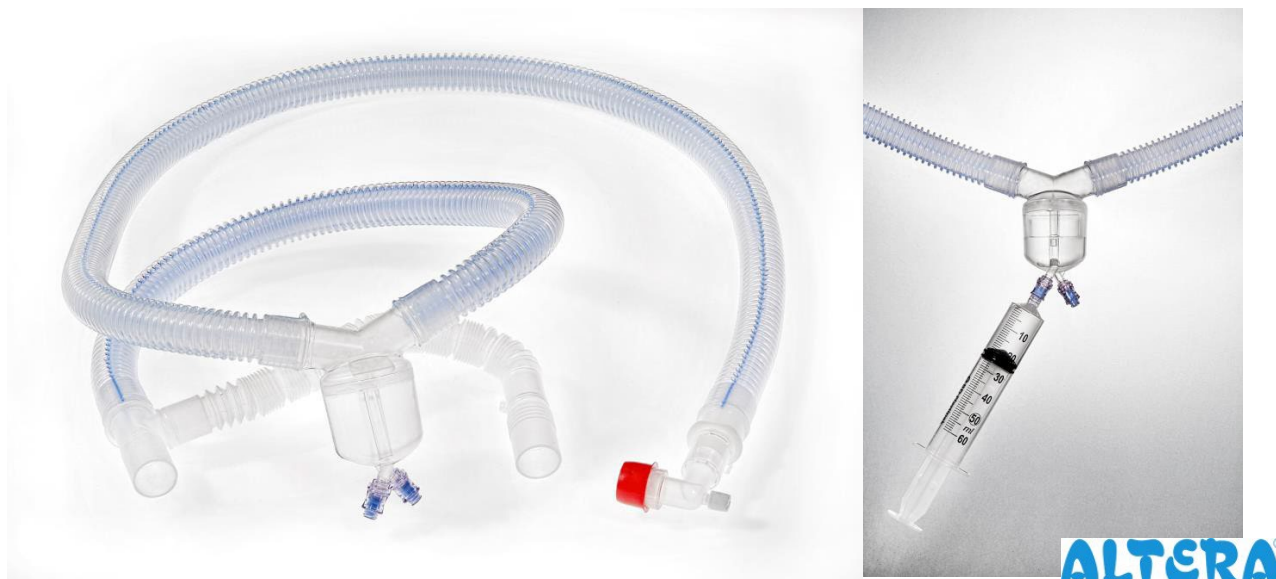

Produktinformation

- **Septiflow** - Anestesi/respiratorslang med eller utan **IGS** (Integrerad Gas Sampling)
- Dubbla vattenfällor för både insp/exp. på vissa artiklar
- IGS (samplingsslang)- innerdiameter 1.5mm \pm 0.05mm på vissa artiklar
- Låg vikt och stabil i sin unika konstruktion med 22mm delad innerlumen.
- Godkänd från >4,5kg
- Värmeeffektiv, den delade innerlumen värmer upp den inspiratoriska gasen.
- Sviveladapter finns på de flesta Septiflow slangarna.
- Rekommenderad användningstid 24 timmar.



Delad innervägg (Septum)



Finns med integrerad vattenfälla för både insp/exp



Finns med IGS (Integrerad Gas Sampling)



Dubbla Halkey- Roberts ventiler för att tömma vattenfällorna

Material anestesislang:

Adapter knä

PP (Polypropen), SBC

Andnings slang

PE

Samplings slang

Medicinsk PVC som innehåller DEHT, PE och EVA

Vattenfälla

PP,PC och SBC



0197

